

## IQ-Cath urval

### Hydrofil kateter för engångsbruk

	IQ-Cath	Färdig för bruk	Extra	Längd	Storlek i CH
Funktionell förpackning	20 <input type="checkbox"/>	Nej	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	21 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	60 <input type="checkbox"/>	Nej	Luer-Lock	43 cm	○ ○ ● ○ ○
Peel-open förpackning	29	Nej	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	29	Nej	–	33 cm	● ○ ● ○ ○
	29	Nej	–	17 cm	● ○ ● ○ ○
	23	Omedelbart	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	23	Omedelbart	–	33 cm	● ○ ● ○ ○
	23	Omedelbart	–	17 cm	● ○ ● ○ ○
	43	Omedelbart	Hylsa	43 cm	● ○ ● ● ●
43	Omedelbart	Hylsa	33 cm	● ○ ● ○ ○	
Urinuppsamlingspåse	26 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	○ ○ ● ● ●
<input type="checkbox"/> Finns även med extra omslag.					<b>10 12 14 16 18</b>

### Gelkateter för engångsbruk

	IQ-Cath	Färdig för bruk	Extra	Längd	Storlek i CH
Funktionell förpackning	30 <input type="checkbox"/>	Nej	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	31 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ●
	32	Omedelbart	–	43 cm	● ○ ● ● ●
Urinuppsamlingspåse	36 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	○ ○ ● ● ●
<input type="checkbox"/> Finns även med extra omslag.					<b>10 12 14 16 18</b>

### Har du några frågor angående IQ-Cath?

Kontakta oss via telefon eller e-post:

Tel. 08-446 15 06  
info@dolema.com

#### MADE IN GERMANY

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Lobbach, Tyskland.



SE 2017-10  
REF 99.909



4 250274 1544656

Distributör:

**Dolema AB**

Bergkällavägen 27 B • 192 79 Sollentuna • Sverige  
Tel. 08-446 15 06 • Fax 08-446 15 07  
info@dolema.com • www.dolema.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten


# iQCATH

Kateter med tre funktionella zoner



Kateter för engångsbruk för  
enkel kateterisering


## Tre funktionella zoner

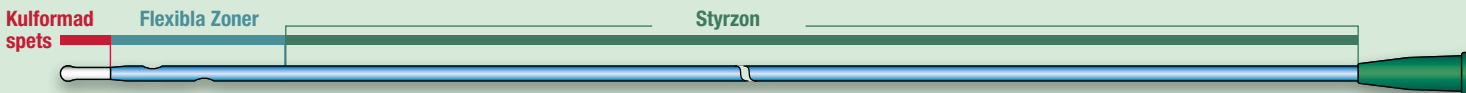

## IQ-Cath kateterns struktur

**4-6 gånger om dagen, 150 gånger i månaden, 1800 gånger om året.** Detta är genomsnittet för en användare som självkateteriserar sig med en kateter genom urinröret

för att tömma urinblåsan. Detta innebär att kvalitet och användarvänlighet är avgörande för att undvika skador på slemhinnor.

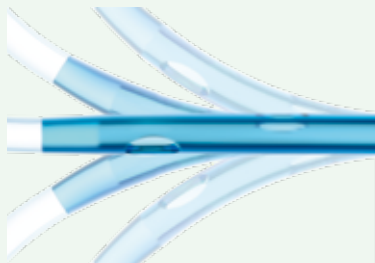

### Kulformad spets (patenterad)

Spetsen på IQ-Cath består av ett mjukt kulformat huvud som sitter ovanpå en böjbar "nacke". Denna kombination gör att katetern kan passera strikturer och utbuktningar i urinröret nästan obehindrat.

### Flexibla Zoner (patenterad)

Kombinationen av den runda spetsen och de flexibla zonerna låter katetern följa urinvägens bana på ett skonsamt sätt.



**Mjukt slipade ögon**  
Kateterns ögon är rundade för att motverka eventuella skador på den ömtåliga slemhinnan i urinvägen.

### Styrzon

Denna del av IQ-Cath katetern, som fortsätter ner till konnektorn, är tillverkad i ett jämförelsevis styvare material som gör införandet enklare.

Instruktionsfilmer om IQ-Cath är gjorda av brukare för brukare. Detta för att hjälpa dig att hitta det bästa sättet att använda IQ-Cath för just ditt behov.



## Hylsa (Sleeve)

### Beröringsfri införing

Hylsan, i form av en tunn plastfilm, täcker katetern helt och möjliggör en införing utan beröring.



## Peel-open förpackning

### Enkel hantering

Håll för fingrarna för att underlätta för användare att öppna förpackningen utan att röra vid katetern.




## Funktionell förpackning

### Mångsidig användning

Den funktionella förpackningen kan användas som en förlängning för att tömma urinen direkt i toaletten. För konnektorn mot spetsen för att tätas påsen.

### Perforeringar

- 1 Öppning
- 2 Dra av vid markeringarna för att skapa en påförelse som kan användas vid införandet

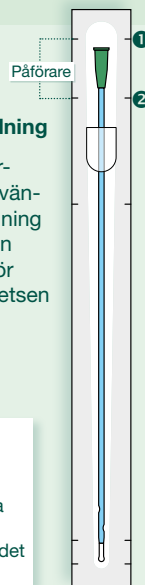

## Allt i ett

### Version ...

... för den hydrofila katetern eller för kateter som används med gel. Kapacitet på uppsamlingspåsen är 1 liter.

